


**ISK-Katheter MTG EZ-Advancer und Cath-Lean**

German Health Care vermarktet seit Kurzem exklusiv in Deutschland die ISK-Katheter MTG EZ-Advancer und Cath-Lean des US-Unternehmens MTG (Medical Technologies of Georgia, Inc.).



MTG EZ-Advancer.

Die Einmalkatheter für den intermittierenden Katheterismus bleiben durch die Einführspitze so lange geschützt, bis die Einführspitze in den Harnröhreneingang eingeführt ist und der Katheter vorgeschoben wird. Somit wird die oftmals keimbesiedelte Harnröhrenmündung überbrückt und eine Keimeinschleusung in die Harnröhre und Blase durch das Verschieben des Katheters minimiert. Das Risiko von Harnwegsinfektionen wird deutlich reduziert.

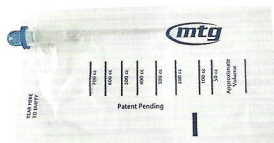

MTG Cath-Lean.

Ein weiterer Vorteil des ISK-Katheters von MTG ist die Handhabung. Bei gängigen Kathetern mit integriertem Auffangbeutel rutscht der Katheter immer wieder in den Beutel zurück, wodurch das Katheterisieren für viele Anwender schwierig ist.

Das patentierte MTG-EZ-Advancer-Ventil, das den Katheter nach jedem Vorschub an Ort und Stelle sichert, verhindert ein Zurückrutschen. Der Katheter wird nach und nach vorgeschoben, und zieht nicht zurück, sodass ein kontrolliertes und leichteres Einführen möglich ist. Der Katheter ist bereits mit Gleitmittel versehen und somit sofort einsatzfähig; die Vorbereitungszeit ist minimal.

Abgerundete, feuerpolierte, glatte Katheteraugen (Löcher) ermöglichen eine atraumatische Anwendung durch die Harnröhre in die Blase. Die Katheteraugen, die sich vorne an der Katheterspitze befinden, sind gegenüberliegend und versetzt angeordnet und sorgen für eine gute Blasenentleerung in den geschlossenen Beutel.


Der Zugang zu den Grifföchern im Auffangbeutel erleichtert das Festhalten während des Katheterisierens und beim Entleeren. Zum Entleeren des Beutels ist im oberen Ende des Beutels eine Perforation angebracht, sodass der Beutel leicht aufzureißen ist und in eine Toilette geleert werden kann.

Die Produkte sind 100 Prozent latexfrei und haben einen DEHP-freien Katheter.

**i** **MTG EZ-Advancer und Cath-Lean**  
GHC German Health Care GmbH,  
Birkstück 15, 24999 Wees, Tel. 0 46 31/  
5 72 00-0, [www.ghc-medical.de](http://www.ghc-medical.de)

**Oberarm-Blutdruckmessgerät BM 95 mit EKG-Funktion**

Das Oberarm-Blutdruckmessgerät BM 95 verfügt über einen EKG-Stick. Es erfolgt eine vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm durch eine Universalmanschette für Oberarmumfänge von 22 bis 42 cm.

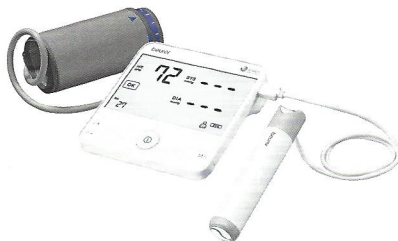


Die 1-Kanal-EKG-Funktion ermöglicht zudem die Aufzeichnung des Herzrhythmus. Durchgeführt wird die Messung mithilfe des EKG-Sticks, der mittels verschiedener Messmethoden eine Anpassung an die individuelle Herzkonfiguration des Anwenders sicherstellt. Die Messung erfolgt in einem 30-Sekunden-Countdown und wird durch blinkende Herzschlaganzeige verdeutlicht.

Das Gerät verfügt über eine erweiterte Arrhythmie-Erkennung, die beispielsweise auch Vorhofflimmern und Extrasystolen erkennen kann. Während des Messvorgangs wird die durchschnittliche Herzfrequenz angezeigt. Nach Ablauf des Countdowns erscheint auf dem Display eine Beurteilung der EKG-Messung.

**i** **BM 95**  
Beurer GmbH, Söflinger Straße 218,  
89077 Ulm, Tel. 07 31/39 89-0,  
[www.beurer.com](http://www.beurer.com)

**Kompressionsversorgung Juzo ScarComfort**

Mit Juzo ScarComfort erweitert Juzo sein Produktsortiment in der Narbentherapie. Die Produktlinie umfasst drei unterschiedliche Kompressionsgestricke: Juzo ScarComfort Pure, Juzo ScarComfort Fine (besonders weich auf der Innenseite) und Juzo ScarComfort Silver (mit eingestricktem antibakteriellem Silberfaden).

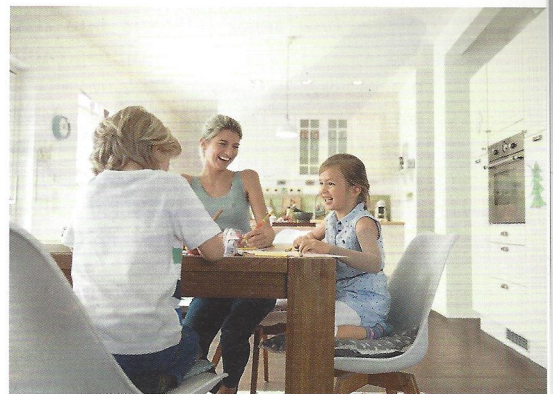

Die Juzo-ScarComfort-Kompressionsgestricke können bei Narben jeder Art eingesetzt und je nach Anforderung individuell nach den Körpermaßen des Patienten gestrickt werden. Sie üben einen angenehmen, medizinisch wirksamen Kompressionsdruck auf das Narbenareal aus, die Narben werden flacher und der Juckreiz wird reduziert.

Bei den Juzo-ScarComfort-Kompressionsprodukten sorgen das weiche und anschießbare Gestrick sowie die nach außen gelegten, flachen und elastischen Nähte für hohen Tragekomfort. Gleichzeitig sorgt das elastische Gestrick für ausreichend Bewegungsfreiheit.

Wichtig für Narbenpatienten ist der Schutz vor Sonneneinstrahlung, um die Narbenheilung nicht negativ zu beeinflussen. Alle drei Ausführungen weisen einen UV-Schutzfaktor UPF 80 gemäß UV Standard 801 auf und bieten so einen Sonnenschutz für die empfindliche Narbe.

Die latexfreien Juzo-ScarComfort-Gestricke stehen für hohe Hautverträglichkeit, optimale Feuchtigkeitsregulierung und leichtes An- und Ausziehen.

**i** **Juzo ScarComfort**  
Julius Zorn GmbH, Juliusplatz 1,  
86551 Aichach, Tel. 0 82 51/9 01-0,  
[www.juzo.de](http://www.juzo.de)